

## Začněte zde

## → Příprava k aplikaci injekce

Cílem této příručky je poskytnout rychlou referenci pro bezpečnou a účinnou aplikaci injekce.

Před aplikací injekce přípravku Benepali® si prostudujte **návod k použití a příbalovou informaci**, kde jsou uvedeny důležité informace, které byste si měli pamatovat. Mezi ně patří informace o možných alergických reakcích, vedlejších účincích a okolnostech, za kterých je zakázáno používat přípravek Benepali®.

(pFfen) CZ, verze 1.0

## Postup aplikace injekce Benepali® perem Benepali®

Pero Benepali® nemá žádné tlačítko, což zjednodušuje správnou aplikaci injekce. **Automatické injekční zařízení** na etanerecept od společnosti Biogen je **kompaktní a lehké**. Etanerecept je účinná látka přípravku Benepali®. Před použitím přípravku Benepali® a pokud je, když obdržíte nové balení na základě lékařského předpisu, si přečtěte **návod k použití a příbalovou informaci**, kde jsou obsaženy důležité informace. Mohou obsahovat nové informace.


**Nepokoušejte se** si aplikovat injekci, pokud vám váš lékař nebo zdravotní sestra neukázali, jak na to.

### Připravte si svůj spotřební materiál

Zvolte si dobře osvětlenou, čistou pracovní plochu a shromážděte:



**Nové předplněné pero Benepali® k automatické aplikaci injekce** (vyjměte z krabice uložené v chladničce)

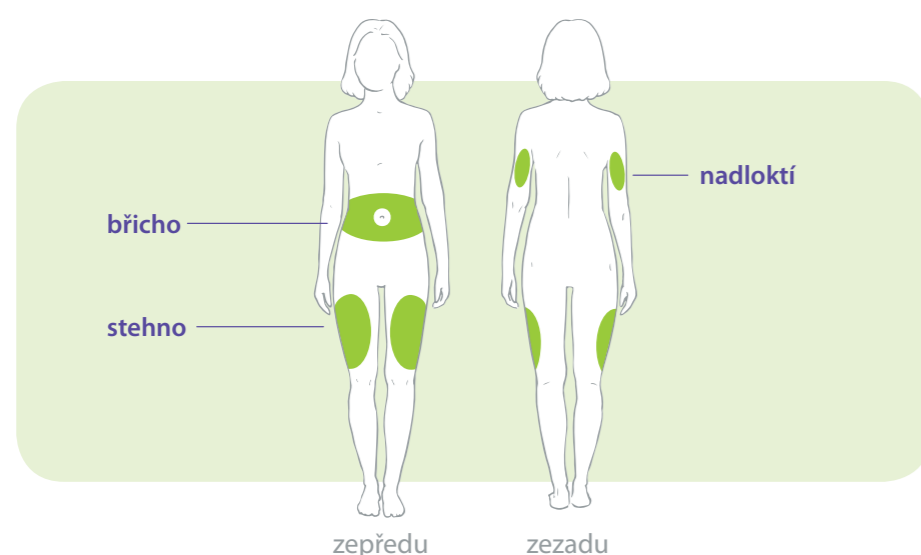

### Pečlivě zkontrolujte

**Zkontrolujte předplněné pero Benepali®**

**Nepoužívejte** předplněné pero poté, co vypršela *dobu použitelnosti*.

**Nepoužívejte** předplněné pero, pokud chybí krytka jehly, nebo když není bezpečně připevněna.

**Nepoužívejte** předplněné pero, pokud spadlo na tvrdý povrch. Může dojít k rozbití součástí uvnitř předplněného pera.

**Zkontrolujte roztok**

Prohlédněte si léčivý přípravek *kontrolním okénkem*. Léčivý přípravek má být čirý až mírně opalescentní, bezbarvý nebo světle žlutý a může obsahovat malé bílé nebo téměř průhledné částice bílkoviny.

**Nepoužívejte** roztok, jestliže změnil barvu, je zakalený, nebo jestliže jsou v něm přítomny jiné než výše popsané částice.

### Nechte léčivý přípravek dosáhnout pokojové teploty

**Počkejte 30 minut**

Předplněné pero Benepali® ponechejte za pokojové teploty po dobu nejméně 30 minut. Je to důležité, protože pak bude injekční podání léčivého přípravku snadnější a pohodlnější.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

K ohřátí léčivého přípravku **nepoužívejte** tepelné zdroje, jako je například mikrovlnná trouba nebo horká voda.

Předplněné pero **neprotřepávejte**.

**Nesnímejte** krytku jehly, dokud nebudete připraven/a injekci podat.



Před aplikací léčivého přípravku počkejte 30 minut

### Vyberte si místo vpichu injekce

**Vyberte místo, kam aplikovat injekci**

Pero Benepali® je určeno k aplikaci podkožní injekce. Injekce se aplikuje do stehna, krajiny břišní (nejméně 5 cm od pupku) nebo zadní strany horní části paže (viz obrázek vlevo).

Pro každou injekci si vyberte vždy jiné místo.

**Nepodávejte** injekci do místa, které je zarudlé, tvrdé, pohmožděné nebo bolestivé, ani do žizev nebo strůj.

Jestliže máte lupénku, **nesmíte podat** injekci do jakkoli vyvýšených, tlustých, červených nebo šupinatých kožních polí ani do lézí.

## → Aplikace injekce pomocí předplněného pera Benepali®



**Omyjte si ruce**


Omyjte si ruce mýdlem a vodou.



**Očistěte místo vpichu**

Otřete kůži v místě vpichu tampónem namočeným v alkoholu.

Před podáním injekce se tohoto místa již **nedotýkejte**.

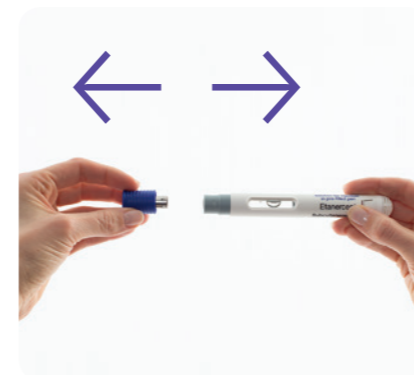

**Stáhněte krytku jehly**

Modrou krytku jehly stáhněte přímým tahem.

**Neotáčejte** ani neohýbejte kryt jehly, když jej odstraňujete, protože to může jehlu poškodit.

Nikdy kryt na jehlu znovu nenasazujte.

Krytku zlikvidujte v nádobě na ostré předměty.



**Napněte kůži, pero přiložte do správné polohy**

Jemně roztáhněte kůži v očištěném místě pro vpich injekce.

Předplněné pero Benepali® držte v úhlu jehlu přibližně **90 stupňů** vůči kůži.

Kůži **nesvírejte**.

Při stisknutí musíte zaslechnout 2 kliknutí



Přidrže ho stisknutý po dobu 15 sekund



Zkontrolujte žlutý píst



**Vyjměte a zkontrolujte**

Odstraňte prázdné pero z kůže.

Kryt jehly zcela jehlu zakryje.

**Zkontrolujte** žlutý píst pera v okénku, abyste si ověřili, že byla podána plná dávka.

## Po aplikaci injekce



**Pero zlikvidujte v souladu s předpisy**

Prázdné pero Benepali® zlikvidujte ve schválené nádobě na ostré předměty. Informujte se u svého poskytovatele zdravotní péče na pokyny, jak správně likvidaci plně odpadní nádoby na ostré předměty.

**Neodhazujte** odpadní nádobu na ostré předměty do domácího odpadu.

Uchovávejte nádobu vždy mimo dohled a dosah dětí.

**Kontrola místa vpichu**

Pokud dojde ke krvácení v místě vpichu, přitlačte na místo vpichu chomáček bavlny nebo gázu.

Místo vpichu **netřete**.

Podle místo vpichu přelepte náplastí.



## Nějaké otázky?

**Zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. Viz Návod k použití.**

Jestliže vám na vaše otázky neodpoví váš lékař nebo zdravotní sestra, lékařské informace a postupy při hlášení nežádoucích účinků si můžete vyžádat na kontaktních telefonních číslech místních zástupců uvedených v příbalovém letáku.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: [www.olecic.cz/hlaseni-prosukl/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.olecic.cz/hlaseni-prosukl/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Adresa pro zaslání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Srobarova 48, Praha 10, 100 41, email: [farmakovigilance@sukl.cz](mailto:farmakovigilance@sukl.cz). Prosíme, do hlášení uvádějte přesný obchodní název a číslo šarže biologického léčiva. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Hlášení může být také zasláno společnosti Biogen (Czech Republic) s.r.o. na adresu: Biogen (Czech Republic) s.r.o. Na Pankráci 1683/127 140 00 Praha 4 Email: [medical-cz@biogen.com](mailto:medical-cz@biogen.com) Tel.: +420 255 706 208

